



Casquette de soulagement des maux de tête

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION

Avant chaque utilisation, assurez-vous de vérifier la doublure intérieure du bonnet pour détecter la présence de cristaux de glace. Ne l'utilisez pas si, pour une raison quelconque, des cristaux de glace ou du gel sont visibles. Si, pour une raison quelconque, le gel de la manche entre en contact avec votre peau ou vos yeux, assurez-vous de laver soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon. Si vous présentez des réactions allergiques, veuillez également à nettoyer la zone avec de l'eau et du savon et consultez votre médecin.

INSTRUCTIONS DE CONGÉLATION

Placez le bonnet dans le sac en plastique fourni et mettez-le au congélateur pendant au moins deux heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement congelé.

Lorsque vous êtes prêt à utiliser le bonnet, sortez-le du congélateur et laissez-le reposer quelques minutes pour qu'il dégèle légèrement. Le bonnet doit être froid au toucher, mais pas complètement gelé. Le bonnet doit être porté pendant 15 à 30 minutes à la fois, plusieurs fois par jour si nécessaire.

Après utilisation, remettez le bonnet au congélateur jusqu'à ce qu'il soit à nouveau nécessaire.

Le bonnet ne doit pas être porté plus de 30 minutes d'affilée, car une exposition prolongée à des températures froides peut provoquer une irritation de la peau ou des engelures.



INSTRUCTIONS DE CHAUFFAGE

Assurez-vous de retirer le bonnet de tout sac de protection en plastique avant de le chauffer, et s'il est congelé, assurez-vous de le décongeler à température ambiante au préalable. Commencez par chauffer le produit au micro-ondes pendant 20 secondes, puis ajoutez-le par tranches de 10 secondes jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Surveillez toujours le bonnet pendant qu'il est au micro-ondes pour vous assurer qu'il ne surchauffe pas. Après le chauffage, laissez le bonnet refroidir complètement avant de le remettre dans le sac de protection en plastique.



PRUDENCE

N'utilisez pas le bonnet s'il est endommagé ou présente des défauts visibles, car cela pourrait potentiellement causer davantage d'inconfort ou de blessures.


Évitez d'utiliser le bonnet s'il provoque une irritation ou un inconfort. -Si vous ressentez des effets indésirables lors de l'utilisation du bonnet, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.

Appliquez le produit sur une peau sèche pour des résultats optimaux et veillez à ne pas le chauffer au micro-ondes trop longtemps pour éviter d'endommager ses propriétés.

Évitez d'utiliser le produit sur des zones infectées ou des plaies ouvertes sans consulter au préalable un médecin, et assurez-vous de le tenir éloigné de l'eau pour éviter qu'il ne soit endommagé ou inefficace. N'oubliez pas que le produit ne doit pas être ingéré, alors assurez-vous de le garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

ENTRETIEN ET INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lors du nettoyage de votre produit, utilisez un chiffon humide pour l'essuyer, puis étendez-le à plat pour le laisser sécher à l'air libre. Ne lavez pas le produit, que ce soit à la main ou en machine, et évitez d'utiliser de l'eau de javel, le nettoyage à sec ou le repassage. Ces méthodes peuvent endommager le produit et réduire ses performances. De plus, n'exposez pas le produit à l'eau chaude et ne le mettez pas au sèche-linge. Si le produit est mouillé, laissez-le simplement sécher à l'air libre. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter pleinement des bénéfices de votre produit aussi longtemps que possible.

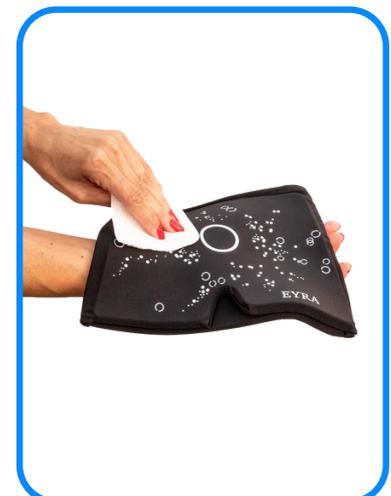

Pour tout problème avec votre produit, veuillez contacter:

support@eyra.group